



ウォッシャー ディスインフェクター
MAT LD1000

スリム&コンパクトなのに大容量!!

1回の処理でDINトレイ最大18枚
1回の処理でDINコンテナー6組

最新型MAT LD1000 の優位性



***省スペース化**
側面にメンテナンススペースが不要
なため、大幅な省スペース化が可能

大容量：

6段式ラックによりDINTレイ18枚の処理が可能です

生産性：

EN ISO15883でバリデーションされた標準工程は最短約45分で完了します

節水性：

1工程の水消費量は約25Lのため洗剤消費を削減できます

正確性：

フローメーターとレベルセンサーにより正確で安全な洗剤供給が可能です

操作性：

高精細な7インチタッチパネルスクリーンによる直感的な操作性により容易な操作が可能です

エルゴノミクスデザイン：

ラック搬入高さは750mmで、日本人にも使いやすい仕様です

静粛性：

60dBA以下

コンパクトサイズ：

横820mm×奥行940mmのスペースがあれば設置可能です

*省スペース化：

装置前面と背面からメンテナンスが行えるので幅2m以下のスペースに設置可能です

Washer Thermodisinfectant
Matachana MAT LD1000

www.matachana.com



	MAT LD1000-E1 MAT LD1000-M1	MAT LD1000-E2 MAT LD1000-M2
本体寸法(mm) :		
開口	820	820
高さ	1985	1985
奥行	936	936
有効内缶寸法(mm) :		
開口	705	705
高さ	690	690
奥行	850	850
有効内缶容量 (L)	413	413
内缶容量 (L)	492	492
容量	DINトレイ18枚 DINコンテナー6組	DINトレイ18枚 DINコンテナー6組
騒音	< 60 dBA	< 60 dBA
電源	200V/3Ø 50~60Hz 24kW	200V/3Ø 50~60Hz 24kW

最新型MAT LD1000 の製品特長

MAT LD1000は中央滅菌供給部門(CSSD)だけでなく、
日帰り手術センターや外来手術センターなどの再生業務における
洗浄と熱消毒の効率を追求して生まれた
全く新しいウォッシャーディスインフェクターです。

次世代のウォッシャーディスインフェクターである
MAT LD1000は処理容量の高さや設置面積を減少できるだけでなく、
使用電力や供給水の減少によりユーザーに大きなメリットをもたらします。

充実の標準装備

- ・ 前面に設置されたメインスイッチ
- ・ 自動圧力制御
- ・ 2つのLED電球による槽内照明
- ・ 7インチタッチスクリーンパネル
- ・ 洗浄槽及び洗浄回路には高品質のAISI 316Lを使用
- ・ 洗浄アームが簡単に取れてメンテナンスが容易
- ・ 上下移動式自動スライドドア
- ・ ペアガラスのドアの採用によりやけどの発生を予防
- ・ フローメーターとレベルセンサー付洗剤は10L容器で4種類まで装置可能
- ・ 40工程を超えるプログラムが選択可能
- ・ 給水・給湯に加えRO水の系統も確保
- ・ 高効率な乾燥システム
- ・ H14グレードのHEPAフィルターを使用
- ・ ウェブから工程のモニタリングが可能
- ・ 熱転写式プリンター
- ・ 工程・完了・エラー表示はタッチスクリーンとアラームで表示



ローディング／アンローディングシステム



Washer Thermoisinfector
Matachana MAT LD1000



マニュアルトrolleyシステム



オートマチック ローディング
／アンローディングシステム




自走式 AL10 ロボティックローディング
／アンローディングシステム



アクセサリ


ウォッシャーディスインフェクターMAT LD1000には
一般手術用器具、マイクロ手術用器具、麻酔科用器具及び研究施設向け器具を含んだ
あらゆる器具に対応したアクセサリを準備しています。

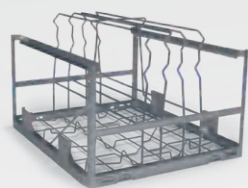

滅菌コンテナ用ラック




6段式ラック

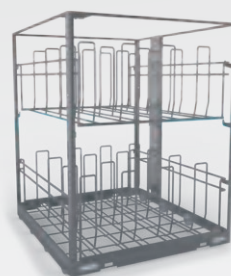


スリッパ用ラック



麻酔科用器具ラック

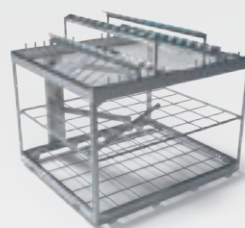

鏡視下手術用器具ラック

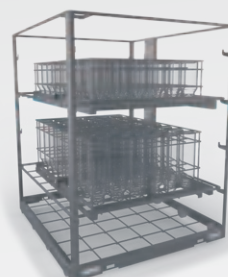

栄養ボトル用ラック



フレキシブル5段ラック
洗浄アームもラックも5段階に調整可能



da Vinci® 用ラック



Washer Thermodisinfectior
Matachana MAT LD1000

www.matachana.com



マタチャナグループ

革新は進むべき道である

50年前の設立より、我々の信念はベストなサービスを提供すること、我々の知識と現場経験をお客様へ提供し日々を促進すること、それにより滅菌供給業務において高い品質を維持しつつ、より効率的に提供できるようにすることです。

その歴史は1962年に始まり、現在では、フランス、ドイツ、イタリア、米国、アルゼンチン、マレーシアに直接の拠点を構え、110以上の国々に直接取引の販売店を持つマタチャナグループとなりました。

マタチャナグループでは、トレーニングとサービスを提供することで、顧客満足度へ繋がると確信しました。そのため、我々は常にこの2つの分野の発展に投資し、お客様と直接連絡を取り、その成果をフィードバックすることで製品を発展させてきました。

品質

マタチャナ社はISO9001とISO13485を取得しています。

環境に優しい

本装置は省エネに特化した、最新の技術を用いてデザイン・製造されています。

- 製造販売届出番号：第13B2X00198000002号
- 一般的名称：器具除染用洗浄器
- 販売名：ウォッシャー ディスインフェクター MAT LD1000



本社・権原工場認証取得

滅菌システムの専門メーカー

株式会社 ウドノ医機

<https://www.udono.com>

